

EXELUX[®] by breo[®] アイリラクサー III 取扱説明書




※取扱説明書は大切に
保管して下さい。

この度は、エグゼラックス・アイリラクサーをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
アイリラクサーは、エアプレッシャー&ヒート機能により目の周辺部に心地よい刺激を与え、パソコン・携帯・TVゲームや長距離ドライブなどで長時間酷使した目をリフレッシュ&リラックスさせることができます。
さらに目の周りのお肌のキメを整えツヤと張りを与えます。
本機はコントローラにより3種類のエアプレッシャーモード及び3種類のヒートモードの切り替えが可能です。
コンパクトに折りたたむことができますので、ご家庭内の様々な場所やお出掛け、旅行などの際にもお気軽に携帯していただけます。

なお、ご使用に関しては取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。

■内容物 内容物が全て揃っている事をご確認ください。


- ① 本体(コントローラ付属)×1個 ② テスト用単三電池×3本 ③ 取扱説明書(本紙) ④ ACアダプタ×1個※

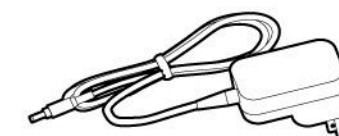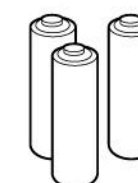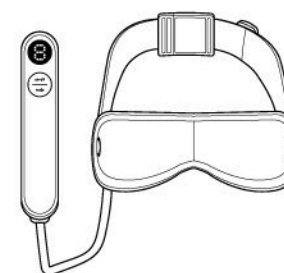


(※アイリラクサーIII ACアダプタ標準タイプのみ付属しています。
ACアダプタ別売りタイプの場合は、別途ご購入ください。)

各 部 名 称

【アイリラクサー本体 (コントローラ付属)】

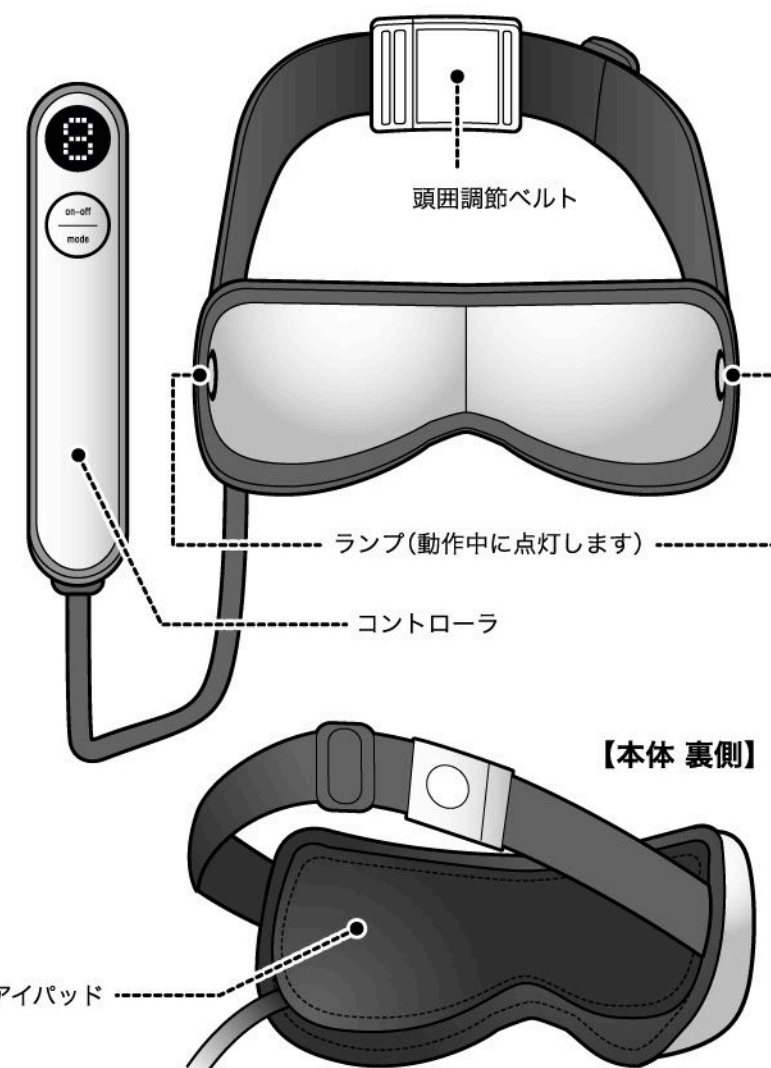

【コントローラ】

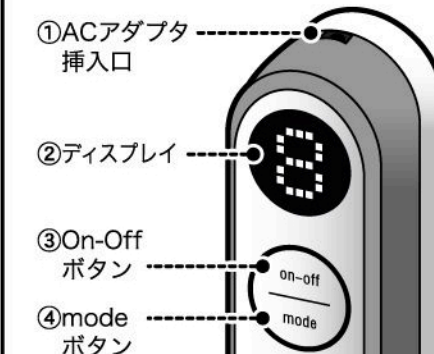


- ① ディスプレイ:
エアプレッシャーモード/ヒートモードを表示
② on-offボタン:
電源オン/ヒートモードの切り替え(ホット
2段階&常温)/電源オフ
③ modeボタン:
エアプレッシャーモードの切り替え(3段階)

使用方法

- 1) コントローラ裏側にある電池ケースのフタを開け、単三電池3本を電池ケース底のマークと同じ向きに入れ(右図参照)、フタを閉めます。ACアダプタを使用される場合は、ジャックを本体の差込口に入れてプラグを家庭用コンセントに差し込みます。

※ 電池取り出し用リボン:

- ①、②の電池の下に敷くようにセットしてください。

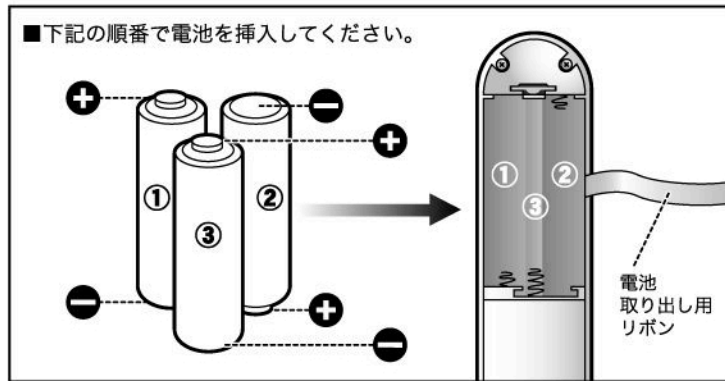

- 2) 本体のベルトを適度に調節し、バックルの中央のボタンを押しながら顔に装着します(ベルトをきつく締めすぎて目を圧迫する、またゆるすぎて落ちることのないように調節してください)。
- 3) コントローラのon-offボタンを1回長押しすると、コントローラ上部にあるディスプレイが点灯し電源が入ります。

エアブレスチャーモード

modeボタンを押すことにより、エアブレスチャーモードを選択します。モードは3段階に切り替えられ、ボタンを押すたびに選択したモードの数字が表示されます(電源を入れた際は①一定 に設定されています)。

① 一定	② リズム(低速)	③ リズム(高速)
------	-----------	-----------

ヒートモード

on-offボタンを短く押すことにより、ヒートモードに切り替わります。モードは3段階に切り替えられ、ボタンを押すたびに、「h」もしくは「H」が3秒ほど表示されます(電源を入れた際は①h-温度 低 に設定されています)。

① h: 温度 低	② H: 温度 高	③ 表示なし: ヒートモードオフ
-----------	-----------	------------------

電源の切り方

on-offボタンを長押しすることで、電源を切ることができます。

⚠ ご使用上の注意

- 目に疾患のある方、目にケガをされている方はご使用をお控えください。または、専門の医師にご相談の上、医師の指示に従ってご使用ください。
- コンタクトレンズを使用している方は、必ず本製品ご使用前にレンズを外してください。
- 使用回数および時間は、1回3～5分、1日2～3回が適当です。長時間のご使用はお控えください。
- お子様のご使用はおやめください。
- ベルトをきつく締めすぎてパッド部が目強く圧迫しないようご注意ください。
- 本機を開閉する際は、指等をはさまないようにご注意ください。
- アイパッドが眼球に触れないようにしてください。
- ペースメーカーをご使用のかたは、誤作動につながりますので、ご使用にならないでください。
- 身体に障害のあるかた、皮膚に疾患のあるかた、現在医師の治療を受けておられるかたは、必ず医師にご相談の上、ご使用ください。
- 濡れた手で機器及びACアダプタに触れたり、水をかけたりしないでください。感電の恐れがあります。また故障の原因になります。
- ACアダプタをご使用の際は、製品付属のACアダプタないしは指定のACアダプタ(MODEL:MTP051JP-045100)をご購入ください。当社指定以外のACアダプタを使用することは危険ですので、おやめください。
- ACアダプタ使用中は電池を抜いてください。機器及び電池に不具合をもたらす恐れがあります。
- 本機のコードを引っ張ったり、引き抜いたりしないでください。
- 自分で改造や穴の修理はしないでください。
- 汚れたときは乾いた布等で拭いてください。
- 高温および高湿度下で使用しないでください。
- 日差しの強いところ、また腐食性のガスが充満したところでは使用しないでください。
- 本機を使用している間は、屋外に出たり、車等の運転はしないでください。
- 機器に故障が発見された場合には、直ちに使用を中止し、電源を切ってください。
- 体に異常を感じたときは、直ちに使用を中止してください。
- 機器本体などは次回の使用に支障のないように清浄し、湿気の少ないところに整理・保管してください。

- 機器および付属品の廃棄に伴うリスク及びこれらのリスクを最小にするための廃棄方法を取ってください。
- 廃棄方法は、各自治体によって異なります。廃棄にあたりましては、各自治体へお問い合わせ下さい。
- 使用前に縫製品に破れがないかどうかを点検してください。破れがある場合は使用を中止してください。
- 仕様は改良などのため、予告なしに変更することがあります。

電池の取扱いについて

- ① 本機は、単三アルカリ電池(1.5V)のご使用を推奨いたします。
※充電式電池(ニッカド・ニッケル水素)もご使用いただけます。ただし、使用時間が短縮されたり、エアプレッシャー強度が弱くなることがあります。
- ② 電池は誤った使い方をすると破裂や発火、液漏れによる機器の腐食や衣服・手を汚す原因となる場合があります。以下のことをお守りください。また使用後の電池の破棄についてはそれぞれの地域の条例に従ってください。
 - 電池交換は3本を同時に行い新旧電池の混用や種類の異なる電池の併用は避けてください。
 - 故障の原因になりますので電池を入れる方向を間違わないようにしてください。
 - 新しい電池と使用済みの電池の混入や、アルカリ電池とその他の種類の電池との混入、また充電式電池のご使用はお控えください。
 - 長期間使用しない場合は、電池を取り外してください。
 - 漏れた液が目・皮膚・衣服についたときはすぐに水で洗い流してください(液漏れの際は電池メーカーへご連絡ください)。
 - プレッシャーが弱くなったり、またヒート機能が弱くなったときに、電池交換の目安です。

仕様

サイズ(約): <本体>広げた状態/幅23×高さ9.5×奥行き10cm、 収納時/幅15.5×高さ9.5×奥行き8.5cm
<コントローラ>幅3.5×高さ18×奥行き3.5cm

<コード>78cm

重量(約): 400 g (電池を除く)

材質: <本体>ABS樹脂、PC(ポリカーボネート)、ゴム、PU(ポリウレタン)
<コントローラ>ABS樹脂、PC(ポリカーボネート)

付属品: テスト用単三電池3本、ACアダプタ(アイリラクサーⅢ ACアダプタ標準タイプのみ)、取扱説明書

消費電力: 4.5W

原産国: 中国

<ACアダプタ>

入力: AC100 - 240V
出力: 4.5V、 1.0A

※専用ACアダプタ標準タイプと別売りタイプがあります(MODEL:MTP051JP-045100)。
別売りタイプのアイリラクサーⅢをご購入の方でACアダプタの追加購入をご希望の方は、
販売店又は輸入総販売元までお問い合わせください。

保証規程

取扱説明書に記載したとおり正しく使用されたにもかかわらず、故障や不具合が生じたときは、お買い上げ日より1年間製品保証をさせていただきますので、お買い上げ時の領収書または送り状・納品書など購入時期やお買い上げ店を証明する書類を大切に保管し、修理の際はご提示ください。ご提示がない場合は、当社では責を負いかねますのでご了承ください。
故障や不具合の原因が製品の不良による場合は、修理または同等の代替品と交換させていただきますが、それ以上の責は負いかねますのでご了承ください。
お買い上げ後2週間以内の初期不良を除き、修理は持ち込み修理となりますので、当社又は販売店へお持ちいただくかお客様の送料負担で当社へお送りください。

※本仕様は改善や改良のために予告なく変更されることがあります。 ※包装やカタログの色と実物の色とは、印刷の都合により異なることがあります。

EXELUX® アイリラクサーⅢ 輸入総発売元



東京都港区東麻布 1-17-9
TEL 03-3589-3300 info@metex.co.jp
FAX 03-3589-5500 www.metex.co.jp/

お客様相談センター: 03-3589-4555 (土曜、日曜、祝祭日及び正月期間を除く平日9:00~17:30)